

EXAMVISION™



Onneksi olkoon  
mittatilausluupeistasi



## Sisältö

---

Esittely .....	3
<b>Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot</b>	
Galilean HD ja Essential .....	4
Kepler Kompakt .....	6
Kepler Advanced .....	8
<b>Takuu .....</b>	<b>10</b>
<b>ExamVision-luuppien lisävarusteet .....</b>	<b>11</b>
<b>Symbolit ja ohjeet oikeaan käyttöön .....</b>	<b>14</b>



## Esittely

Olet valinnut korkealaatuisen mittojesi mukaan valmistetun tarkkuustyökalan. Jos luuppisi tarvitsee säätöä, noudata video-ohjeita huolellisesti, tai pyydä apua paikalliselta ExamVision-edustajaltasi.

ExamVision-luoppien työskentelyetäisyyttä ja reseptilinssejä voidaan päivittää, mikäli näkösi muuttuu ajan myötä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ExamVision-edustajaasi.

Luuppisi on valmistettu huolella juuri sinun mittojesi mukaan. Toivomme sinun olevan täysin tyytyväinen tuotteeseen.



## Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot



### Galilean HD ja Essential

Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi käytön. Näin varmistat, että luuppisi istuvat oikein ja näet luuppien läpi tarkasti. Luupprien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppisi liitteenä olevaan laadunvalvontakorttiin.

Katso video *“Does your loupe fit correctly?”* saadaksesi optimaalisen selkeän kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. Tämä varmistaa luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan kuvan mukaisesti:



---

### Videot

Löydät ExamVision-videoita kanavallamme YouTubeista ja Vimeosta. Skannaa QR-koodi täältä:






## Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot



### Kepler Kompakt

Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi käytön. Näin varmistat, että luuppiesi istuvat oikein ja näet luuppien läpi tarkasti. Luupprien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppiesi liitteenä olevaan laadunvalvontakorttiin.

Kepler Kompakt tarkennetaan tarkasti yksi silmä kerrallaan omalle työskentelyetäisyydelle. Voit lukita tarkennuksen mukana toimitetulla työkalulla. Katso video *"Fitting your Kepler Kompakt loupe"* saadaksesi optimaalisen selkeän kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. Tämä varmistaa luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan kuvan mukaisesti:

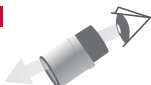

---

### Videot

Löydät ExamVision-videoita kanavallamme YouTubeista ja Vimeosta. Skannaa QR-koodi täältä:







## Laadunvalvonta, hienosäätö ja videot



### Kepler Advanced

Katso ExamVision-videot ennen kuin aloitat uusien luuppiesi käytön. Näin varmistat, että luuppisi istuvat oikein ja näet luuppien läpi tarkasti. Luupprien työskentelyetäisyys on asetettu haluamallesi etäisyydelle. Tämä etäisyys on kirjoitettu uuden luuppisi liitteenä olevaan laadunvalvontakorttiin.

Kepler Advanced tarkennetaan tarkasti yksi silmä kerrallaan omalle työskentelyetäisyydelle. Katso video *“Fitting your Kepler Advanced loupe”* saadaksesi optimaalisen selkeän kuvan, mukavuuden ja täydellisen istuvuuden. Tämä varmistaa luupin oikean korkeuden ja kulman alla olevan kuvan mukaisesti:



### Videot

Löydät ExamVision-videoita kanavallamme YouTubeista ja Vimeosta. Skannaa QR-koodi täältä:



## Takuu

---

### Valmistajan takuu 5 vuotta

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Huomioi, että takuu ei kata käytöstä aiheutuvaa normaalia kulumista tai väärinkäyttöä, huolimattomuutta, vahinkoja, modifiointia, kuljetusta ilman alkuperäistä koteloa tai väärää sovitusta, huoltoa tai puhdistusta.

Ongelmatapauksissa käänny ExamVision-edustajasi puoleen.

Katso myös: [examvision.com/warranty](https://examvision.com/warranty)



## ExamVision-luoppien lisävarusteet

---



### Nenätyyny

Kirkkaat nenätyyny. Useita eri kokoja.



### Niskanauha

Niskanauhan avulla luupit pysyvät tukevasti paikoillaan. Silikonipäät.



### Johtopidikkeet ja adapterit Visionshield-kasvosuojille

Kiinnitä johtopidikkeet aisaan ja paina johto varovasti paikalleen.



### Puhdistusneste (alkoholiton)

Puhdistusnesteemme pitävät luuppisi puhtaana. Ruiskuta pieni määrä mikrokuituliinalle ja poista turvallisesti lika, pöly ja rasva.

## ExamVision loupe accessories

---



### Desinfiointipyyhkeet (alkoholiton)

Desinfiointipyyhkeemme pitävät luuppisi puhtaana.

Helppo ja nopea tapa turvallisesti irrottaa lika, pöly ja rasva.



### Visionshield (size L, XL and MAX)

Suojaa luuppeja ja kasvoja roiskeilta ja lialta.

Kiinnitetään ExamVision-luuppeihin Velcro-

adaptereilla. Koko L sopii Galilean HD ja

Essential-luuppeihin. Koko XL sopii Kepler-

luuppeihin. Näissä malleissa on leikattu aukko

valoa varten.

Visionshield MAX on kokokasvovisiiri, joka sopii

kaikkiin ExamVision-luuppeihin.

ExamVision-suojat valmistetaan joustavasta

muovikalvosta. Helppo puhdistaa, desinfioida ja käyttää uudelleen.



### Sideshields

Lähes näkymättömät, höyhenenkevyet

sivusuojat suojaavat silmiä roiskeilta ja

partikkeileilta. Kertakäyttöiset. Pakkaus sisältää

kolme paria.



### **Jalokivet**

Mikäli haluat lisää yksilöllisyyttä, miksi et lisääisi timanttia? Timantti (0,02 carat / 1,7mm) upotettu sterling-hopeiseen kantaan. Tanskalaisen korusuunnittelijan käsityönä tekemä koru Icon-kehystä varten. Valittavana myös rubiini- ja safiirikorut.



### **Värilliset aisan suojat**

Antiallergeeniset aisan suojat personointi ja mukavaa käyttöä varten. Valmistettu keinokumista. Saatavilla eri värisinä.

Katso lista saatavilla olevista lisäosista:  
[examvision.com/loupes-lights/accessories/](http://examvision.com/loupes-lights/accessories/)



## Symbolit ja ohjeet oikeaan käyttöön

---



### Valmistaja

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.  
www.examvision.com



eFU Indicator

### Tutustu käyttöohjeisiin

Katso digitaaliset versiot eri kielillä tästä linkistä:  
[examvision.com/support](http://examvision.com/support)



### Varoitus. Oikea käyttö ja huolto

ExamVision-luuppisi on tarkkuusinstrumentti. Oikea käsittely on tärkeää, jotta luuppisi pysyvät kunnossa. Luupit tarvitsevat säännöllisiä tarkastuksia. Mikäli huomaat kulumista tai vahingoittumista tai luupit tuntuvat löysemmiltä kuin aluksi, lopeta käyttö ja ota välittömästi yhteyttä ExamVision-edustajaasi huollon ja varaosien saamiseksi. Paikallinen optikko myös voi mahdollisesti auttaa pienissä säädöissä ja kiristämään ruuveja. ÄLÄ modifioi tai muuta luuppeja.

### Allergiat

ExamVision käyttää ainoastaan korkealuokkaisia ja allergiatestattuja materiaaleja. Kehykset on sovitettava siten, että vain nenätyyny ja aisansuojat koskettavat ihoa. Mikäli ihoärsytystä ilmaantuu, ota yhteys ExamVision-edustajaasi.

### Hoito ja puhdistus

ÄLÄ käytä alkoholipohjaisia aineita puhdistukseen. Käytä ainoastaan ExamVisionin suosittelemia alkoholivapaita puhdistus- ja desinfiointiaineita ja nukkaantumaton puhdistusliinaa. ÄLÄ autoklaavaa tai käytä ultraäänipuhdistusta. ÄLÄ käytä UV-puhdistusta.



**Pidä poissa auringonvalosta.**

Älä jätä luuppeja suoraan auringonvaloon. Suurentavat linssit voivat muodostaa "kuuman polttopisteen", joka voi sytyttää tulipalon.



**Pidä kuivana**



**Särkyvää, käsiteltävä varovasti.**



**Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut.**



 [facebook.com/ExamVisionDK](https://facebook.com/ExamVisionDK)

 [instagram.com/examvision/](https://instagram.com/examvision/)

 [linkedin.com/company/examvision-aps](https://linkedin.com/company/examvision-aps)

[www.examvision.com](https://www.examvision.com)