

EXAMVISION™



Felicitări pentru noul
dvs. sistem cu LED



Cuprins

Introducere	3
No iunitintroductive – Utilizarea luminii pentru prima dată	
Directia cablului de lumina	4
Cablu înlocuibil	4
Ajutor și îndrumare	4
Garantie	5
Unitatea de control și lumina	
PowerBand	6
Focus™ Xtend	10
Essential One	12
Essential Alpha	16
Simboluri și instrucțiuni pentru utilizarea adecvată	18



Introducere

Ati ales un sistem de iluminare de înaltă calitate, adaptat pentru a furniza cantitatea exactă de lumină, exact acolo unde aveti nevoie. Sistemele de iluminat ExamVision au un timp de funcționare de la 2 la 24 de ore, în functie de sistemul ales și de intensitatea luminii.

Sistemele noastre de iluminat sunt concepute pentru a fi utilizate în medii sterile, atât pentru operare fără atingere cât și fără mâini.

Pentru a obtine rezultate optime de la noul dvs. sistem de iluminare, urmati cu atentie instructiunile de ghidare și videoclipurile sau solicitati asistență dealer-ului dvs. local ExamVision.


Notiuni introductive – Utilizarea luminii pentru prima dată

Directia cablului de lumina

Cu excepția LED-ului Essential One, care este fără fir, cablul de lumină poate fi atașat la brațul din dreapta sau din stânga al ochelarilor cu lupă. Pentru un echilibru optim, recomandăm trecerea cablului în jurul gâtului și atașarea acestuia la unitatea de control din partea opusă.

Lumini Focus™ și Essential Nano:

Pentru a schimba direcția cablului, slăbiți șurubul mic și rotiți ușor inelul în poziția dorită. Asigurați-vă că inelul atinge cablul și apoi strângeți șurubul.

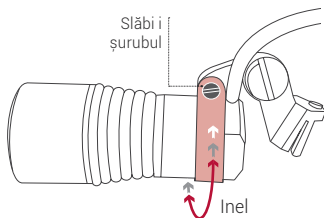

Lumina Essential Alpha:

Pentru a schimba direcția cablului, directionați pur și simplu cablul spre partea dreaptă sau stângă a ochelarilor cu lupă.

Cablul înlocuibil Lumini Focus™ și Essential Nano:

În cazul în care cablul dvs. se deteriorează, îl puteți înlocui cu ușurință. Contactați dealerul dvs. local ExamVision, care vă poate asigura înlocuirea.



Ajutor și îndrumare

Vizitați Centrul nostru de servicii pe canalul de YouTube al ExamVision pentru a viziona videoclipuri utile. Pentru a viziona acum, scanați codul QR. Pentru specificații tehnice suplimentare, vizitați examvision.com

Garantie

**Unitate de control PowerBand/Unitate de control Focus™ Xtend/
Sistem de iluminat și accesorii Focus™ True & Bright și Essential
Nano**

Garantie de la producător cu acoperire pe 3 ani.

**Cablu înlocuibil și plăcuță spate Focus™ True & Bright și Essential
Nano**

Garantie de la producător cu acoperire pe 1 an.

**Unitate de control, baterie, lumină, cablu și accesorii Essential
Alpha**

Garantie de la producător cu acoperire pe 1 an.

Essential One

Garantie de la producător cu acoperire pe 2 ani.

Baterie, încărcător și accesorii Essential One

Garantie de la producător cu acoperire pe 1 an.

Uzura normală, deteriorarea datorată utilizării sau întreinerii necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție. În cazul unei defectiuni, vă rugăm să returnați dispozitivul dealer-ului dvs. ExamVision pentru a fi reparat.

Consultați, de asemenea: examvision.com/warranty



PowerBand



Mod de operare PowerBand

Dreapta Senzor de mișcare fără atingere



Modificarea intensității luminii
Trecerea mâinii peste senzor schimbă intensitatea luminii de la mică la mare.



Stingere
Tine i mâna deasupra senzorului timp de 3 secunde.

Stânga Buton de pornire

Aprindere
Apăsati Butonul de pornire o dată.



Comutarea între părțile de operare
Pentru a comuta modul de operare între Butonul de pornire și senzorul Fără atingere, apăsați Butonul de pornire de 3 ori în succesiune rapidă. Când lumina clipește ROȘU, Butonul de pornire este activ. Când lumina clipește VERDE, Senzorul de mișcare este activ.



Modificarea intensității luminii
Un singur clic modifică intensitatea luminii de la mică la mare.



Stingere
Tine i apăsat timp de 2 secunde.



Mod de operare PowerBand

Memorie

Atunci când stingeti PowerBand, acesta va retine setările (intensitatea luminii și modul de operare).

Durata de functionare

Durata de functionare a bateriei variază în functie de intensitatea luminii. Setarea luminii la intensitate scăzută vă poate oferi până la 24 de ore de utilizare continuă, iar la intensitate ridicată aproximativ 12 ore.



Starea nivelului bateriei



Încărcată 100% - 20%
Lumină continuu verd



Încărcată 20% - 10%
Lumină continuu galbenă



Încărcată 10% - 0%
Lumină continuu roșie

Starea de încărcare a bateriei



Încărcată
10% - 0%

Lumina clipește roșu



Încărcată
10% - 20%

Lumina clipește galben



Încărcată
20% - 99%

Lumina clipește verde



Încărcată
100%

Continuu verde

Retineti: Unitatea lămpii nu poate fi pornită în timp ce PowerBand se încarcă.

Timpul mediu de încărcare pentru o baterie goală este de 2,5 ore.



Focus™ Xtend



Mod de operare Focus™ Xtend

Aprindere



Apăsați Butonul de pornire o dată.
(Unitatea de control nu se va activa decât dacă este conectată o lampă.)

Modificarea intensității luminii



Unitatea de control Focus™ Xtend poate fi operată fără mâini, apăsând panoul frontal cu cotul, de exemplu.

O scurtă apăsare pe panou comută prin cele 3 intensități de iluminare.

Stingere



Tineți apăsat timp de 2 secunde.

Durata de funcționare

Durata de funcționare a bateriei variază în funcție de intensitatea luminii, de la 6 până la 24 de ore de utilizare continuă.



Starea de încărcare a bateriei

Când bateria trebuie încărcată, indicatorul de încărcare va clipi.



Timpul mediu de încărcare pentru o baterie goală este de 2,5 ore.

Essentiäl One



Mod de operare Essential One

Pornire
/oprire



Așezați acumulatorul pe suportul de conectare al lămpii. Porni i/opri i lampa printr-o singură atingere pe partea de sus a bateriei.

Modificarea
intensității
luminii




Lampa dvs. are două intensități diferite, ce pot fi controlate printr-o atingere rapidă în partea dreaptă.


Notă

Atunci când atașați sau detașați lampa frontală de rama Essential One, glisați lampa pe șinele conectorului. Asigurați-vă că faceți acest lucru drept pe verticală, așa cum este ilustrat mai jos cu săgeți roșii. Aplicați o presiune ușoară deasupra când apăsați lampa în pozitie.

Atunci când o scoateți, aplicați presiune chiar dedesubt cu degetul mare. Nu o răsucați pe orizontală și spre exterior.

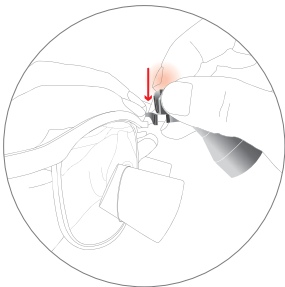

Atașarea lămpii

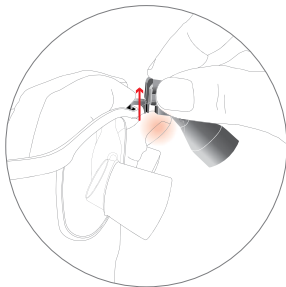

Detașarea lămpii

Mod de operare Essential One

Durata de functionare

Durata de functionare a bateriei variază în functie de intensitatea luminii, de la 2 până la 3,5 de ore de utilizare continuă.



Starea de încărcare a bateriei

Când bateria emite un bip, trebuie încărcată.



Conectati suportul de încărcare la încărcător și așezati bateria pe suportul de încărcare.

Timpul mediu de încărcare pentru o baterie goală este de 1,5 ore.

 Încărcare  Baterie încărcată



Essential Alpha



Modul de operare al dispozitivului Essential Alpha

Pornire
/oprire



Rotiti butonul pentru a aprinde și
stinge lumina.


Modificarea
intensității
luminii



Rotiti butonul pentru a modifica
intensitatea luminii.

Durata de functionare

Setarea luminii la intensitate scăzută vă poate oferi până la 12 de ore de utilizare continuă; la intensitate ridicată, aproximativ 4 ore.

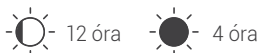

Starea nivelului bateriei

Indicatorul de alimentare va arăta cât de încărcată este bateria.

■ ■ ■ ■ 25% încărcată

■ ■ ■ ■ 50% încărcată

■ ■ ■ ■ 75% încărcată

■ ■ ■ ■ 100% încărcată

Starea de încărcare a bateriei

■ Încărcare ■ Baterie încărcată

Simboluri și instrucțiuni pentru utilizarea adecvată



Producător

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danemarca.
www.examination.com



eFU Indicator

Citiți instrucțiunile de utilizare

Pentru versiunile digitale în diferite limbi, accesați acest link: www.examination.com/support



Atentie. Utilizare corectă și întreținere

NU modificați și nu schimbați produsul dvs. ExamVision. Evitați să atingeți carcasa lămpii în timpul utilizării prelungite la intensitate ridicată a luminii, deoarece aceasta se poate încălzi. Nu expuneți produsul la condiții extreme de căldură, frig sau umezeală.

Dispozitivele cu LED au o lumină foarte puternică; nu priviți direct în lumină și nu o îndreptați către ochii altor persoane. Utilizați numai încărcătorul original furnizat, deoarece orice alt încărcător poate deteriora produsul.

Nu scurcircuitați produsul dvs. ExamVision.

Pentru a obține o durată de viață optimă, manipulați întotdeauna dispozitivele cu grijă.

Nu încercați să vă reparați singur produsul ExamVision. În cazul în care dispozitivele se deteriorează sau nu funcționează corect, contactați dealerul dvs. ExamVision pentru ajutor ulterior.

Îngrijire și curățare

Curățați cu o cârpă moale și asigurați-vă că nu există praf pe mufe și conexiuni.

Îngrijirea bateriei

Bateria este parțial încărcată de la producător. Cea mai bună practică este să vă păstrați bateria încărcată la mai mult de 30%. Încărcările parțiale nu dăunează bateriei.

Durata de via ă a bateriei

Când bateria dvs. ajunge la sfârșitul duratei de via ă naturale, după aproximativ 500 de încărcări, veți vedea că trebuie încărcată mai des.

Rezisten a la apă

Lampa și unitatea de control ExamVision nu sunt concepute pentru a fi scufundate în apă. Curățați imediat orice stropi pentru a evita deteriorarea unității.

Dezinfectare

Folosiți numai produse de dezinfectare fără alcool, cum ar fi Șervelele dezinfectante ExamVision (disponibile la dealer-ul dvs. ExamVision). NU folosiți produse pe bază de alcool, produse de cură are cu ultrasunete, autoclave sau alte metode de dezinfectare cu agenți chimici. Un șervelele umed poate scurtcircuita bateria dacă atinge ambele puncte de contact în același timp. NU utilizați metode de dezinfectie cu UV, care cresc temperatura ochelarilor cu lupă sau a lămpii.

Ieșire încărcător

PowerBand: DC 5V.2A.10W

Focus™ Xtend: DC 12V.1A.12W

Essential One: DC 5V.2.4A.12W

Essential Alpha: DC 5V.1A.5W



Păstra i produsul uscat



Pot apărea interferen e în apropierea echipamentelor marcate cu acest simbol



Fragil, manipula i cu grijă



Nu arunca i produsele electronice împreună cu deșeurile generale



Nu utiliza i dacă ambalajul este deteriorat



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com