

EXAMVISION™



Čestitamo na vašoj visoko
specijaliziranoj lupi



Sadržaj

Uvod	3
Kontrola kvalitete, fino podešavanje i video snimke	
Galilean HD & Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Jamstvo	10
Dodaci za ExamVision lupe	11
Simboli i upute za pravilnu uporabu	14



Uvod

Odabrali ste instrument visoke preciznosti krojen po vašim mjerama. Ako je potrebno podesiti vašu lupu, zapamtite da se radi o složenom i preciznom instrumentu. Stoga, pažljivo pratite upute s video snimke – ili zatražite pomoć od vašeg lokalnog ExamVision predstavnika.

Budući da se vaš vid s vremenom mijenja, ExamVision će prilagoditi radnu udaljenost vaše lupe i unaprijediti naočalne leće. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se vašem ExamVision predstavniku.

Vaša lupa je pažljivo proizvedena i posebno prilagođena vašim zahtjevima. Nadamo se vašem 100 % zadovoljstvu.



Kontrola kvalitete, fino podešavanje i video snimke



Galilean HD & Essential

Prije nego započnete s radom, molimo vas da pogledate ExamVision video snimke kako bi osigurali pravilne postavke i jasnoću. Već smo postavili poželjnu radnu udaljenost između prednjeg dijela vašeg oka i subjekta. Postavljena udaljenost nalazi se u priloženoj kartici kvalitete.

Pogledajte video snimku pod nazivom *“Does your loupe fit correctly?”* za optimalnu jasnoću, udobnost i savršene postavke. To će osigurati pravilnu visinu i kut lupe, kako je prikazano u nastavku:



Video snimke

ExamVision video snimke možete pronaći i na našim YouTube i Vimeo kanalima. Za gledanje skenirajte QR kod:






Kontrola kvalitete, fino podešavanje i video snimke



Kepler Kompakt

Prije nego započnete s radom, molimo vas da pogledate ExamVision video snimke kako bi osigurali pravilne postavke i jasnoću. Već smo postavili poželjnu radnu udaljenost između prednjeg dijela vašeg oka i subjekta. Postavljena udaljenost nalazi se u priloženoj kartici kvalitete.

Vaš Kepler Kompakt morate fino podešiti jedno po jedno oko, na vašoj radnoj udaljenosti. Postavite optimalni fokus pomoću priloženog imbus ključa. Pogledajte naš video *"Fitting your Kepler Kompakt loupe"* za optimalnu jasnoću, udobnost i savršene postavke. To će osigurati pravilnu visinu i kut lupe, kako je prikazano u nastavku:

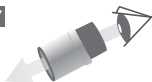

Video snimke

ExamVision video snimke možete pronaći i na našim YouTube i Vimeo kanalima. Za gledanje skenirajte QR kod:





Kontrola kvalitete, fino podešavanje i video snimke



Kepler Advanced

Prije nego započnete s radom, molimo vas da pogledate ExamVision video snimke kako bi osigurali pravilne postavke i jasnoću. Već smo postavili poželjnu radnu udaljenost između prednjeg dijela vašeg oka i subjekta. Postavljena udaljenost nalazi se u priloženoj kartici kvalitete.

Vaš Kepler Advanced morate fino podesiti jedno po jedno oko, na vašoj radnoj udaljenosti. Pogledajte naš video *"Fitting your Kepler Advanced loupe"* za optimalnu jasnoću, udobnost i savršene postavke. To će osigurati pravilnu visinu i kut lupe, kako je prikazano u nastavku:



Video snimke

ExamVision video snimke možete pronaći i na našim YouTube i Vimeo kanalima. Za gledanje skenirajte QR kod:



Warranty

5-godišnje jamstvo proizvođač

- Sve Galilean HD lupe
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Imajte na umu da jamstvo ne pokriva nedostatke uzrokovane uporabom ili trošenjem stvari, zlouporabom, zanemarivanjem, slučajnim oštećenjima, preinakama, isporukom u neoriginalnom pakiranju, neopreznim postupanjem, nepravilnim održavanjem, rukovanjem, servisiranjem ili čišćenjem.

U slučaju kvara uređaj vratite vašem ExamVision predstavniku za izvođenje popravka.

Molimo, posjetite: examvision.com/warranty



Dodaci za ExamVision lupe



Nosni jastučići

Silikonski nosni jastučići raznih veličina.



Vezice za naočale

Osjetljive, ali trajne vezice za dodatnu sigurnost tijekom nošenja lupa – sa silikonskim dodacima.



Kabelska kopču

Pričvrstite kabelsku kopču na krilo vaših lupa i nježno gurnite LED kabel u kopču.



Otopina za čišćenje (bez alkohola)

Naša otopina za čišćenje nezaobilazan je dodatak za čišćenje i održavanje lupa. Malu količinu otopine nanosite na tkaninu od mikrovlakana kako biste uklonili nečistoću, prašinu, mrlje i masnoću.

Dodaci za ExamVision lupe



Maramice za čišćenje (bez alkohola)

Naše maramice nezaobilazan su dodatak za čišćenje i održavanje lupu. Ove jednokratne maramice natopljene otopinom za čišćenje na brz i jednostavan način uklanjaju nečistoću, prašinu, mrlje i masnoću s lupu.



Zaštitni vizir (L, XL I MAX veličine)

Štiti vašu lupu i lice od prskanja i nečistoća. Jednostavni pričvršćivanje na ExamVision lupu s čičak trakom. Veličina L odgovara Galilean HD i Essential lupama – veličina XL pristaje uz Kepler lupu. Ove verzije imaju otvor na viziru za lampicu.

MAX zaštitni vizir prekriva cijelo lice i jednostavan je za pričvršćivanje na bilo koju ExamVision lupu kao dio vaše radne rutine.

ExamVision zaštitni viziri izrađeni su od otpornog i fleksibilnog plastičnog filma koji se jednostavno čisti i dezinficira za ponovnu uporabu.



Bočne obrazine

Gotovo nevidljive, perolake bočne obrazine oči štite od prskanja i krhotina stranih tijela. Za jednokratnu uporabu. Dostupne u pakiranju od šest komada.



Ukrasno drago kamenje

Zašto na naočalni okvir ne biste dodali i dijamant za maksimalno personalizirano optičko rješenje? Dijamant težine 0,02 karata (1,7 mm) umetnut je u ležištu od sterling srebra. Ručna izrada danskog dizajnera nakita za veću prepoznatljivost i osebnost prekrasnog Icon okvira. Drago kamenje dostupno za umetanje: dijamanti, rubini, safiri. Mi ih usavršavamo. Vi ih personalizirate.



Protuklizni nastavci u boji

Hipoalergenski protuklizni nastavci za personalizaciju i udobno prijanjanje. Izrađeni od umjetne gume. Dostupni u širokom rasponu boja.

Čitavom popisu dostupnih dodataka možete pristupiti na:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symbols and instructions for proper use



Proizvajalec

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska
www.examvision.com



Pogledajte upute za uporabu

Za digitalne inačice na različitim jezicima slijedite ovu vezu: examvision.com/support



Pažnja. Pravilna uporaba i održavanje

Vaša ExamVision lupa je precizan instrument. Kao i kod svakog drugog proizvoda visoke kvalitete, potrebna je odgovarajuća njega kako bi sačuvali vašu lupu u savršenom radnom stanju. Kod normalne, svakodnevne uporabe, vašoj lupi bit će potrebno povremeno servisno održavanje. Redovito pregledavati. Vaš lokalni očni specijalist može vam pomoći kod podešavanja ili pričvršćivanja vijaka. NE vršite izmjene vaše lupe.

Alergije

ExamVision koristi samo hipoalergene materijale visoke kvalitete. Vaša lupa treba biti opremljena nosnim jastučićem i protukliznim nastavcima. U vrlo rijetkim slučajevima iritacije, kontaktirajte vašeg ExamVision predstavnika.

Briga i održavanje

NE koristiti alkohol za čišćenje. Koristite samo preporučene ExamVision proizvode za čišćenje i dezinfekciju bez alkohola te mekanu krpu bez dlačica. NE koristiti metodu autoklaviranja ili ultrazvučnog čišćenja. NE koristiti metodu dezinfekcije UV svjetlima.



Držati podalje od sunčeve svjetlosti

Nemojte ostaviti lupu na izravnom suncu. Povećavanje dovodi do nastanka žarišta koje može uzrokovati požar.



Držati na suhom



Osjetljivo, pažljivo rukujte



Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com